

CE FDA ISO13485
Reg. No. 3004179819

JOIN ENTERPRISE Ltd.



OPTIMA Splint & Cast

Polyester & Nonwoven

Orthopaedic Casting Tape


環境にやさしく、身体にフィットし、快適&かんたん装着



骨折、捻挫等に対する整形外科用の副木です。

しっかり装着 5分でOK!


OptimaSplint & OptimaSplint Roll の種類 すべてのスプリントの有効期間は、製造年月日から3年間です。

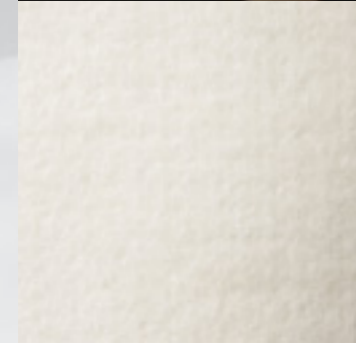

不織布



ファイバーグラス (8枚重ね)

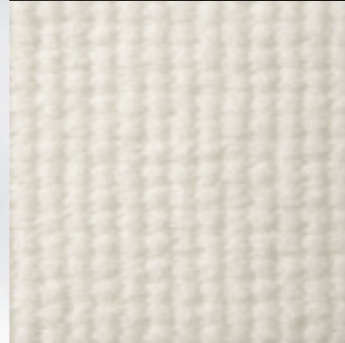

ポリエステル



OptimaSplint™ (オプティマ スプリント)

芯素材は不織布、ファイバーグラス、ポリエステルの3種類の物があり、それぞれに特徴を生かした機能的な副木です。とくに、不織布は薄く柔らかい形に作られているため、従来品と比べて患部（損傷部位）に当てやすく、自然な装着感が得られます。また、不織布は細菌が繁殖しにくいので、皮膚の炎症や匂いの発生を防ぎます。さらに、副木として必要な強度を保った上で、あらゆる形成に対応する柔軟性を発揮します。

オプティマ スプリント 製品番号

SW- 不織布			
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	枚 / 箱	
SW210	2in (5.1cm) x 25cm	10	
SW312	3in (7.6cm) x 30cm	10	
SW320	3in (7.6cm) x 50cm	10	
SW335	3in (7.6cm) x 88cm	10	
SW415	4in(10.2cm) x 38cm	10	
SW420	4in(10.2cm) x 50cm	10	
SW430	4in(10.2cm) x 76cm	10	
SW530	5in(12.7cm) x 76cm	10	
SW545	5in(12.7cm) x 114cm	5	
SW630	6in(15.3cm) x 76cm	10	
SW645	6in(15.3cm) x 114cm	5	

SF- ファイバーグラス			
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	枚 / 箱	
SF210	2in (5.1cm) x 25cm	10	
SF312	3in (7.6cm) x 30cm	10	
SF320	3in (7.6cm) x 50cm	10	
SF335	3in (7.6cm) x 88cm	10	
SF415	4in(10.2cm) x 38cm	10	
SF420	4in(10.2cm) x 50cm	10	
SF430	4in(10.2cm) x 76cm	10	
SF530	5in(12.7cm) x 76cm	10	
SF545	5in(12.7cm) x 114cm	5	
SF630	6in(15.3cm) x 76cm	10	
SF645	6in(15.3cm) x 114cm	5	

SP- ポリエステル			
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	枚 / 箱	
SP210	2in (5.1cm) x 25cm	10	
SP312	3in (7.6cm) x 30cm	10	
SP320	3in (7.6cm) x 50cm	10	
SP335	3in (7.6cm) x 88cm	10	
SP415	4in(10.2cm) x 38cm	10	
SP420	4in(10.2cm) x 50cm	10	
SP430	4in(10.2cm) x 76cm	10	
SP530	5in(12.7cm) x 76cm	10	
SP545	5in(12.7cm) x 114cm	5	
SP630	6in(15.3cm) x 76cm	10	
SP645	6in(15.3cm) x 114cm	5	


※ ポリエステルは受注生産になります。

OptimaSplint & OptimaSplint Roll の使用方法


下記の使用法は一つの例です。従来通りの方法でも全く問題はありません。



1 施術者は手袋をはめます。スプリントを半分に折ります。片方を開封して、そこに冷たい少量の水を注ぎ入れます。

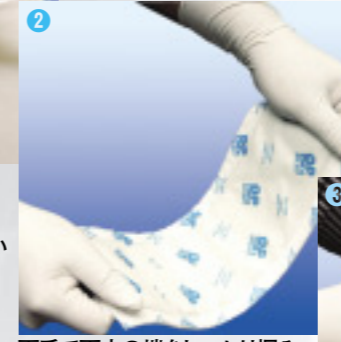

2 両手で両方の端をしっかり掴みます。

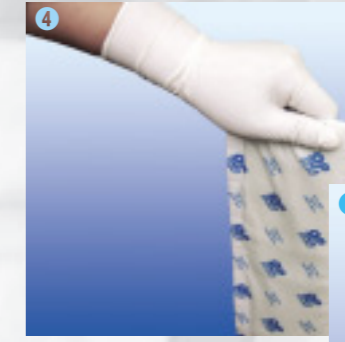

3 中の芯の布を硬化させるために端から端へとくねらせる様に数回ゆらします。



4 水を注ぎ入れた方の端から余分な水を外に捨てます。



5 装着完了!



OptimaSplint™ Roll (オプティマ スプリント ロール)

Splintと同じように、不織布、ファイバーグラス、ポリエステルの3種類の芯素材があります。全体の長さが450cm(1inを除く)と長いため、必要なサイズに切って患部へ処置できます。

オプティマ スプリント ロール 製品番号

SW- 不織布			
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱	
SW100	1in (2.5cm) x 110cm	1	
SW200	2in (5.1cm) x 450cm	1	
SW300	3in (7.6cm) x 450cm	1	
SW400	4in(10.2cm) x 450cm	1	
SW500	5in(12.7cm) x 450cm	1	
SW600	6in(15.3cm) x 450cm	1	

SF- ファイバーグラス			
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱	
SF100	1in (2.5cm) x 110cm	1	
SF200	2in (5.1cm) x 450cm	1	
SF300	3in (7.6cm) x 450cm	1	
SF400	4in(10.2cm) x 450cm	1	
SF500	5in(12.7cm) x 450cm	1	
SF600	6in(15.3cm) x 450cm	1	

SP- ポリエステル			
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱	
SP100	1in (2.5cm) x 110cm	1	
SP200	2in (5.1cm) x 450cm	1	
SP300	3in (7.6cm) x 450cm	1	
SP400	4in(10.2cm) x 450cm	1	
SP500	5in(12.7cm) x 450cm	1	
SP600	6in(15.3cm) x 450cm	1	

※ ポリエステルは受注生産になります。



- この製品は密封された包装材の中に収納されています。
- 保管する時はピンホール等から外気が入り込まないように注意して下さい。
- 有効期間が記載してありますので、最適条件で製品を使用するために有効性を確かめて下さい。

骨折、捻挫等に対する整形外科用のギブス包帯です。

通気性が良く、快適なキャストイングテープ

OptimaCast™ &
OptimaCast™ Soft

すべてのキャストの有効期間は、製造年月日から3年間です。


OptimaCast™ &
OptimaCast™ Soft の使用方法



1
キャストを5秒間水に浸します。
余分な水分を取り除くために軽く絞ります。



2
当該箇所に適当な力でキャストを巻きます。
巻きながら巻き方を整えたり、形を整えたりします。

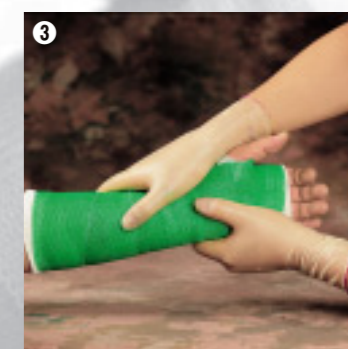

3
装着完了!



OptimaCast™ (オプティマ キャスト)

水に反応するポリウレタン樹脂を浸み込ませたファイバーグラスとポリエステル
の2種類があります。ポリエステルの織物はそのまま焼却することができ、
環境にもやさしい素材です。



OptimaCast™ Soft (オプティマ キャスト ソフト)

ファイバーグラスの素材を使用しています。患部への装着後、Cast Soft は
弾力性があるためにわずかに患部を動かすことができ、リハビリテーションの
際などに効果を高めます。

当分の間、このキャストソフトは販売を見合わせています。

オプティマ キャスト 製品番号

※ 基本色は白と緑になります。他の色は受注生産になります。

CF- ファイバーグラス		
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱
CF100	1in (2.5cm) x 180cm	10
CF200	2in (5.1cm) x 360cm	10
CF300	3in (7.6cm) x 360cm	10
CF400	4in (10.2cm) x 360cm	10
CF500	5in (12.7cm) x 360cm	10

CP- ポリエステル		
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱
CP100	1in (2.5cm) x 180cm	10
CP200	2in (5.1cm) x 360cm	10
CP300	3in (7.6cm) x 360cm	10
CP400	4in (10.2cm) x 360cm	10
CP500	5in (12.7cm) x 360cm	10

テープの色 12色




! 巻きながら巻き方を整えたり、形を整えたりします。
巻き付けをすべて終えるまで3~5分の間で行います。
必要な強度の硬化には20分程かかります。

オプティマ キャスト ソフト 製品番号

※ 基本色は白と緑になります。他の色は受注生産になります。

CS- ファイバーグラス		
製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱
CS100	1in (2.5cm) x 180cm	10
CS200	2in (5.1cm) x 360cm	10
CS300	3in (7.6cm) x 360cm	10
CS400	4in (10.2cm) x 360cm	10
CS500	5in (12.7cm) x 360cm	10

テープの色 10色

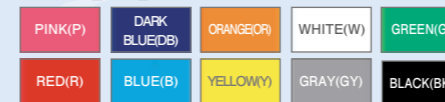

- ! 1. 浸す水の温度が高くなればなるほど OptimaCast™ Soft の硬化はますます早くなります。
2. 水の吸収時間が増すと、OptimaCast™ Soft の取り付け時間が短くなります。
3. 取り付け時間を長く必要な時は OptimaCast™ Soft は水に浸すことなく使用する事が出来ます。

OPTIMA PAD™ & OPTIMA STOCKINETTE™



Join Enterprise社の製品は、
高い品質で世界中の人々に愛用されています。

Join Enterprise社は、医療器機製造会社および輸出会社の一つで、整形外科用のポリエステル樹脂を使用したポリエステルのテープ（ギブス包帯）、整形外科用の副木の製造販売をしています。

企画開発の結果、製品の成形力、人体への合致、軽量、強度のように基本となる特性を作り出す事に成功しました。その結果、すべての製品に対して、EUのCEマーク、米国のFDAの承認を得る事が出来ました。

米国、ギリシャ、ドイツ、イタリア、トルコ、イラン、アラブ首長国連邦、中国を含めて40ヶ国だけでなく、国内において100万本以上のスプリント、キャストを提供し続けています。我々の製品は競争力のある価格、高品質をもって世界中に受け入れられています。



肌に優しい緩衝生地 緩衝用の下地布です。



Optima Pad™ (オプティマ パッド)

オプティマキャスト、オプティマスプリントの下に巻く生地で、硬化したキャストと肌の上に巻く緩衝用の下地布です。100%不織布からできているため、長期間の使用でも皮膚をつねに乾いた状態に保ちます。また、表面が滑らかく通気性が良いため、快適な装着を実現します。

オプティマ パッド 製品番号

※有効期間は、製造年月日から7年間です。

製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱
PD002	2in (5.1cm) x 360cm	24
PD003	3in (7.6cm) x 360cm	12
PD004	4in (10.2cm) x 360cm	12

皮膚を守る木綿生地 緩衝用の下地布です。



Optima Stockinette™ (オプティマ ストッキネット)

純正のメリアスを使用した木綿緩衝生地硬化したキャストの下に巻いて、尖った物から肌を保護する緩衝用の下地布です。最高品質の素材を使用しているため、肌にしっかりと馴染み、ふやけや炎症から皮膚を守ります。


オプティマ ストッキネット 製品番号

※有効期間は、製造年月日から7年間です。

製品番号	規格 (幅 X 長さ)	巻 / 箱
NT002	2in (5.1cm) x 20m	1
NT003	3in (7.6cm) x 20m	1
NT004	4in (10.2cm) x 20m	1

Join Enterprise Ltd.

- Branch Office & Factory
- Representative
- Distributer

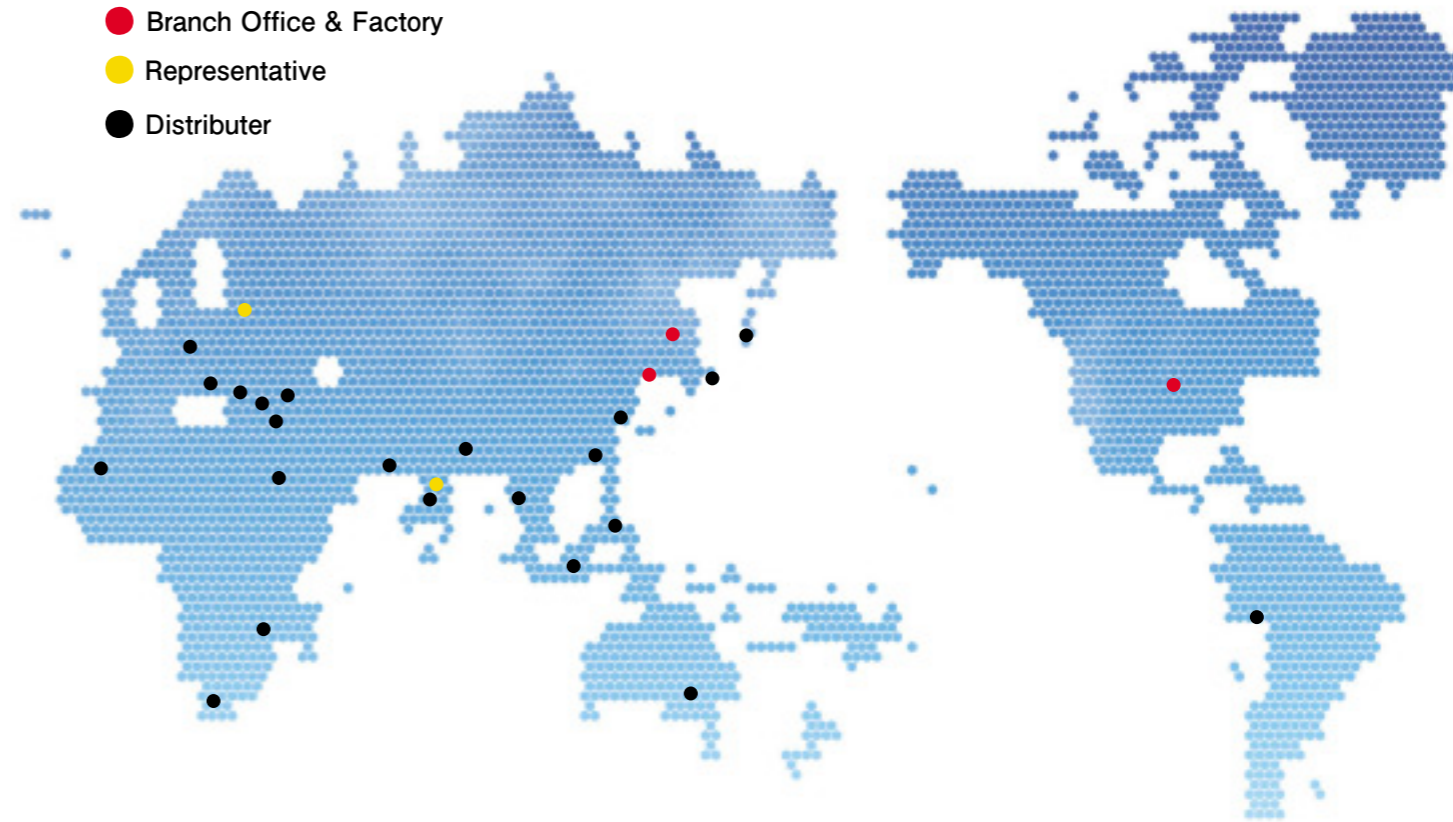

ISO 13485 : 2003



CE




Registration of Brand in U.S.A



FDA



Registration of Brand in CHINA

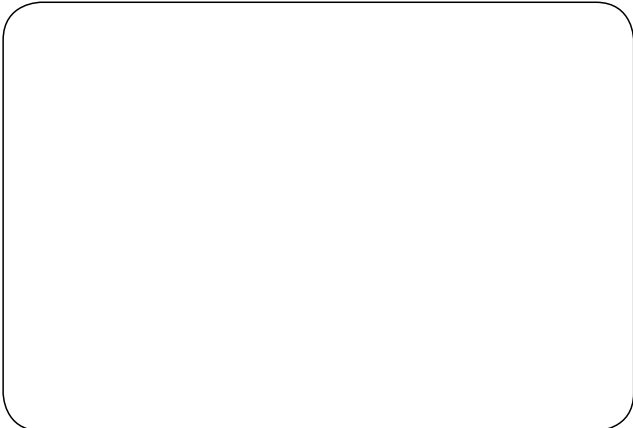

輸入総代理店

NSN 株式会社 西野医科器械

特販事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-6-6

TEL: 03-3816-1227 FAX: 03-3816-1253

E-mail: nsn-info@nishino-ika.co.jp